



Ribbond®

bondable reinforcement ribbon

Залепващи и подсилващи продукти



Инструкции: Ribbond® - Залепващи и подсилващи продукти

BG

Ribbond Оригинал, Ribbond THM, Ribbond Ултра THM

Описание:

Риббонд залепващо подсилващи влакно е изработен от полиетиленови влакна с ултрависоко молекулно тегло и е обработен със студена газова плазма за подобряване на адхезията със смолите.

Употреба:

Риббонд подсилва денталните смоли.

Декларация за предназначение:

Популярните приложения на Риббонд включват подсилване на композитни шини и мостове. В ЕС Риббонд е одобрен за поставяне върху или в емайла.

Препоръки за употреба:

Не докосвайте Ribbond лентата с ръце или латексови ръкавици, преди да нанесете смолата (бонда). Използвайте пинсета, клещи или памучни ръкавици, за да извършите манипулацията. След нанасяне на смола (бонд), работете с Ribbond, както работите с композит (инструмент или ръкавици).

Препоръки за съхранение:

Затворете Риббонд опаковката с кламер, след отваряне, за да запазите свойствата на лентата за бондиране.

Залепване на Риббонд към композит:

Напоявяте влакното Риббонд с ненапълнена композитна смола (бонд), несъдържаща дентинов праймер или ецваща киселина.

Залепване на Ribbond към акрили:

Навлажнете Ribbond със смес от течност и прах. Вмъкнете Ribbond в неполимеризиран акрил.

Полиране на Ribbond:







Подсилената лента не се полира. Покрийте Ribbond с напълнена композитна смола или акрил.

Изхвърляне:

Няма специални препоръки.






Шини:

1. **Измерете количеството Рибонд**, което Ви е необходимо. Използвайте конец или фолио, за да направите модел.
2. **Отрежете Рибинд**, като го държите с пинсета (не трябва да се докосва до ръцете).
3. **Подгответе зъбите за залепване**. Поставете свързваща смола (бонд) и полимеризирайте.
4. **ИНапоете Робонд с бонд**. Използвайте ненапълнен свързваща смола, несъдържаща дентинов праймер или ецваща киселина. [1]
5. **Поставете композит на зъбите**. Поставете тънък слой от средновискозитетен композит на нивото на контактите. [2]
6. **Притиснете напоения Рибонд в композита**. [3-5]
7. **Премахнете излишния композит и полимеризирайте**. [6]
8. **Покрийте Рибонт с течен композит и светнете(втвърдете)**.
Подсилващото влакно не се полира. Загладете композита преди полимеризирането.

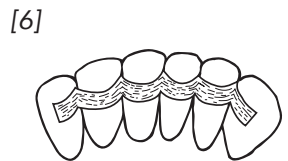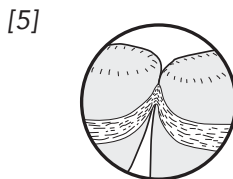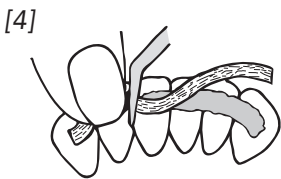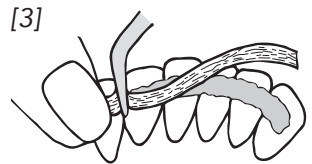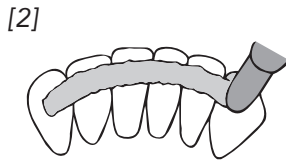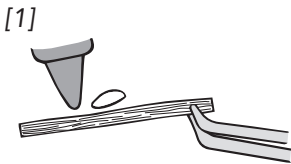

Мостове:

1. **Измерете количеството Рибонд**, което Ви е необходимо. Използвайте конец или фолио, за да направите модел.
2. **Отрежете Рибинд** като го държите с пинсета (не трябва да се докосва до ръцете).
3. **Подгответе зъбите за залепване**. Поставете свързваща смола (бонд) и полимеризирайте.
4. **Напоете Робонд с бонд**. Използвайте ненапълнен свързваща смола, несъдържаща дентинов праймер или ецваща киселина. [1]
5. **Поставете композит на зъбите**. Поставете тънък слой от средновискозитетен композит на нивото на контактите. [2]
6. **Притиснете напоения Рибонд в неполимеризирания композит**. [3-6]
7. **Премахнете излишния композит и полимеризирайте**.
8. **Добавете втори слой от Рибонд в посочената област**.
 - а. Поставете тънък слой от средновискозитетен композит в лингвално/палатиналната страна на полимеризирания Рибонд и върху интерпроксималните ъгли на абатмантите. [7]
 - б. Напоете Рибонд със смола (бонд) и поставете в неполимеризирания композит. [8-9]
 - в. Премахнете излишния композит и полимеризирайте.
9. **Изградете посочената зона**. Изградете с композит или използвайте естествения зъб на пациента.
10. **Покрийте Рибонд с течен композит и полимеризирайте**. Подсиленото влакно не се полира. Загладете композита преди да полимеризирате.

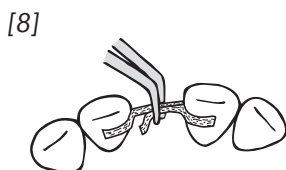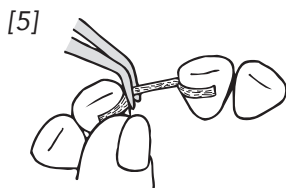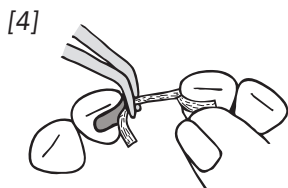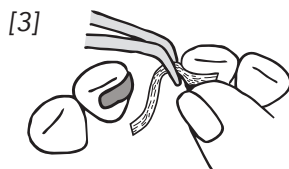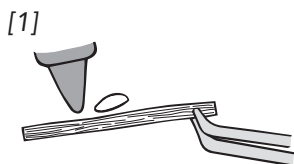

Съдържание:

Ribbond Стартер Кит съдържа:

Ribbond лента и ножица. Ножицата за Ribbond е предназначена само за рязане на Ribbond- лентата.

Ножицата не е предназначена за други цели.

Ribbond Refill сет съдържа:

Ribbond - залепваща, подсилваща лента

Само за професионална употреба.

Докладвайте за всички сериозни инциденти на Ribbond, Inc
и на Вашия оторизиран представител

www.ribbon.com



Залепващи и подсилващи продукти

Ribbond® - Залепващи и подсилващи продукти

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond, Inc.
2200 South St.
Racine WI 53404 USA
800-624-4554
ribbon@ribbon.com
www.ribbon.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
24976 Handewitt
Germany