



Ribbond®
bondable reinforcement ribbon

bondovací dlahovací páska



Návod k použití: Ribbond® bondovací dlahovací páska



Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM
Original Ribbond, Ribbond-Triaxial

Popis:

Bondovatelné výztužné vlákno Ribbond je vyrobeno z polyethylenových vláken s ultravysokou molekulovou hmotností a je ošetřeno studenou plazmou pro zvýšení přilnavosti k pryskyřicím.

Účel:

Vlákno Ribbond zpevňuje zubní pryskyřice.

Prohlášení o zamýšleném použití:

Obvyklé použití vlákna spočívá ve zpevnění kompozitních dlah a můstků. V EU je vlákno Ribbond schváleno k aplikaci na sklovinu nebo do ní.

Manipulace:

Před aplikací pryskyřice se nedotýkejte Ribbondu rukama nebo latexovými rukavicemi. Manipulujte s Ribbond pomocí kleští, pinzety nebo bavlněnými rukavicemi. Po aplikaci pryskyřice manipulujte s Ribbond jako s pryskyřicí (nepudrované nástroje nebo rukavice).

Skladování:

Po otevření uzavřete balení Ribbond papírovým klipem, aby došlo k zachování bondovatelnosti.

Bondování vlákna na kompozit:

Navlhčete vlákno neplněnou bondovací pryskyřicí, která neobsahuje dentinové primery ani kyselé leptací prostředky.

Bondování Ribbondu k akrylátu:

Navlhčete Ribbond volnou směsí tekutiny a prášku. Vložte Ribbond do nevytvrzeného akrylátu.

Leštění:

Neleštit se. Pokryjte Ribbond naplněným kompozitem nebo akrylátem.

Likvidace:

Žádná zvláštní opatření.


Dlahy:

1. **Odměřte potřebné množství vlákna.** Pomocí nitě nebo fólie vytvořte vzor.
2. **Nastříhejte vlákno.** Manipulujte s ním pomocí kovových kleští.
3. **Připravte zuby k bondování,** naneste pryskyřici a nechte vytvrdnout.
4. **Navlhčete vlákno pryskyřicí.** Použijte neplněnou bondovací pryskyřici bez dentinových primerů nebo kyselých leptadel. [1]
5. **Naneste kompozit na zuby.** Naneste tenkou vrstvu středně viskózního plněného kompozitu na úroveň kontaktů. [2]
6. **Navlhčené vlákno vtlačte do kompozitu.** [3-5]
7. **Odstraňte přebytečný kompozit a zpolymerujte.** [6]
8. **Pokryjte vlákno tekutým kompozitem a zpolymerujte.** Vláknité výztuže se neleští. Před vytvrzením kompozit vyhladíte.


[1]




[2]

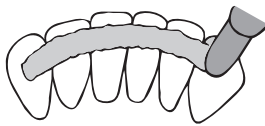


[3]

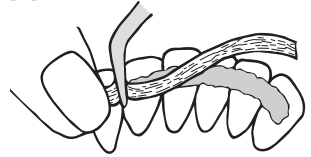


[4]

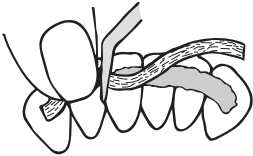

[5]

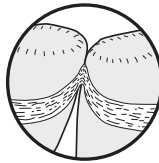


[6]

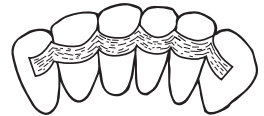

Můstky:

1. **Odměřte potřebné množství vlákna.** Pomocí nitě nebo fólie vytvořte vzor.
2. **Ustříhnete vlákno.** Manipulujte s ním pomocí kovových kleští.
3. **Připravte zuby k bondování,** naneste bondovací pryskyřici a nechte vytvrdnout.
4. **Navhčete vlákno pryskyřicí.** Použijte neplněnou bondovací pryskyřici bez dentinových primerů nebo kyselých leptadel. [1]
5. **Naneste kompozit na zuby.** Naneste tenkou vrstvu středně viskózního plněného kompozitu v místě uchycení můstku. [2]
6. **Do nevytvrzeného kompozitu vtlačte navlhčené vlákno.** [3-6]
7. **Odstraňte přebytečný kompozit a zpolymerujte.**
8. **Přidejte druhou vrstvu vlákna v oblasti můstku.**
 - a. **Naneste tenkou vrstvu středně viskózního plněného kompozitu na lingvální/palatální stranu vytvrzeného vlákna a na interproximální úhly abutmentů.** [7]
 - b. **Navlhčete vlákno pryskyřicí a vložte do nevytvrzeného kompozitu.** [8-9]
 - c. **Odstraňte přebytečný kompozit a zpolymerujte světlem.**
9. **Vytvořte můstek.** Sestavte z kompozitu nebo použijte přirozený zub pacienta.
10. **Vlákno překryjte tekutým kompozitem a zpolymerujte.** Vlákenné výztuhy se neleští. Před vytvrzením kompozit vyhladte.

[1]

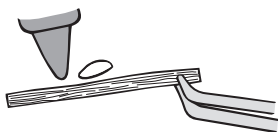


[2]


Naplněný
kompozit




[3]

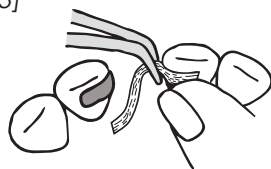

[4]

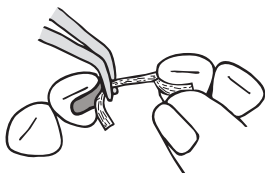


[5]

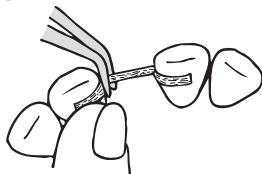

[6]

První kousek
vlákna

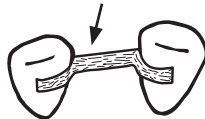

[7]

Naplněný
kompozit



[8]



[9]



Obsah:

Ribbond starter kit obsahuje:

Ribbond® bondovací dlahovací pásku a nůžky.
Ribbond nůžky jsou určeny pouze pro stříhání Ribbond pásky.

Ribbond refill kit obsahuje:

Ribbond® bondovací dlahovací pásku.

Pouze pro profesionální použití.

Jakékoli závažné incidenty nahláste společnosti
Ribbond, Inc. a příslušnému orgánu.

www.ribbond.com



Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond, Inc.
2200 South St.
Racine WI 53404 USA
800-624-4554
ribbond@ribbond.com
www.ribbond.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
24976 Handewitt
Germany