



Ribbond®

bondable reinforcement ribbon



Instrukcijas: Ribbond®

LV

savienojamie stiegrojuma produkti

Oriģinālā lente, Lente-THM, Ribbond Ultra-THM

Apraksts:

Ribbond līmējamā stiegrojuma šķiedra ir izgatavota no īpaši augsta molekulārā svāra polietilēna šķiedrām un apstrādāta aukstās gāzes plazmā, lai uzlabotu saķeri ar sveķiem.

Mērķis:

Ribbond pastiprina zobu sveķus.

Paziņojums par paredzēto izmantošanu:

Populāri Ribbond lietojumi ir kompozītmateriālu šuvju un tiltu stiprināšana. ES Ribbond ir atļauts lietot uz emaljas vai tās iekšpusē.

Apstrādes prasības:

Pirms sveķu uzklāšanas nepieskarieties lentei ar rokām vai lateksa cimdēm. Rokturis Ribbond ar pinceti, knaibles vai kokvilnas cimdēm. Pēc sveķu uzklāšanas rīkojieties ar lenti tāpat kā ar sveķiem (instrumentus vai pulvera nesaturošus cimdus).

Uzglabāšanas prasības:

Pēc atvēršanas aizzīmogojiet lentes iepakojumu ar saspraudi, lai saglabātu savienojamību.

Ribbond līmēšana uz kompozīta:

Mitr Ribbond ar neaizpildītu saistvielu, kas nesatur dentīna gruntskrāsvielas vai skābes kodinātājus.

Līmlente ar akrilu:

Mitrā lente ar šķidra un pulvera maisījumu. Iestrādāt lenti nesacietējušā akrilā.

Pulēšanas lente:

Šķiedru pastiprinājumi nepulē. Pārklājiet lenti ar pildītu kompozītmateriālu vai akrilu.


Likvidēšana:

Nav īpašu apsvērumu.

Spraugas:

1. **Izmēriet nepieciešamo Ribbond daudzumu.** Izmantojiet diegu vai foliju, lai izveidotu modeli.
2. **Sagrieziet Ribbond.** Ar metāliskajām knaiblēm.
3. **Sagatavojiet zobus līmēšanai,** uzklājiet līmēšanas sveķus un tos sacietē.
4. **Samitriniet Ribbond ar sveķiem.** Lietojiet neaizpildītu līmēšanas līmi bez dentīna gruntskrāsām vai skābes kodinātājiem. [1]
5. **Uzklājiet kompozītu uz zobiem.** Uzklājiet plānu vidējas viskozitātes pildīta kompozīta kārtiņu kontaktu līmenī. [2]
6. **Piespiediet samitrinātu Ribbond kompozītmateriālā.** [3-5]
7. **Noņemiet papildu kompozītu un sacietējiet.** [6]
8. **Pārklājiet Ribbond ar plūstošu kompozītu un nogataviniet.** Šķiedru stiegrojums netiek pulēts. Pirms sacietēšanas izlīdziniet kompozītu.


[1]

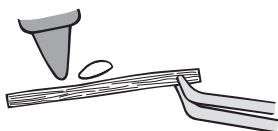


[2]




[3]

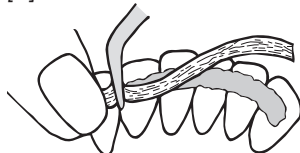


[4]

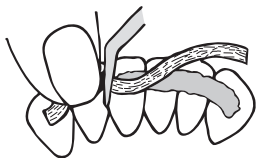

[5]








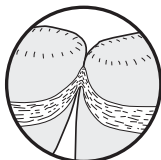


[6]

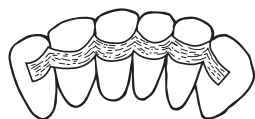

Tilti:

1. **Izmēriet nepieciešamo Ribbond daudzumu.** Izmantojiet diegu vai foliju, lai izveidotu modeli.
2. **Sagrieziet Ribbond.** Ar metāliskajām knaiblēm.
3. **Sagatavojiet zobus līmēšanai,** uzklājiet līmēšanas sveķus un tos sacietē.
4. **Samitriniet Ribbond ar sveķiem.** Lietojiet neaizpildītu līmēšanas līmi bez dentīna gruntskrāsām vai skābes kodinātājiem. [1]
5. **Uzklājiet kompozītu uz zobiem.** Uzklājiet plānu vidējas viskozitātes pildīta kompozīta kārtiņu kontaktu līmenī. [2]
6. **Piespiediet samitrinātu Ribbond nesacietējušajā kompozītmateriālā.** [3-6]
7. **Noņemiet papildu kompozītu un sacietējiet.**
8. **Pievienojiet otro Ribbond slāni ponta zonā.**
 - a. **Uzklājiet plānu vidējas viskozitātes pildīta kompozīta slāni uz sacietējušā Ribbond lingvālās/palatālās puses un uz abutmentu interproksimālajiem leņķiem.** [7]
 - b. **Samitriniet Ribbond ar sveķiem un ievietojiet nesacietējušajā kompozītā.** [8-9]
 - c. **Noņemiet lieko kompozītmateriālu un veiciet cietināšanu.**
9. **Izveidojiet pontiku.** Izgatavo ar kompozītu vai izmanto pacienta dabīgo zobu.
10. **Pārklājiet Ribbond ar plūstošu kompozītu un sacietējiet.** Šķiedru stiebrojums netiek pulēts. Pirms sacietēšanas izlīdziniet kompozītu.

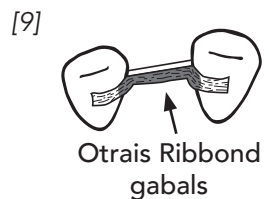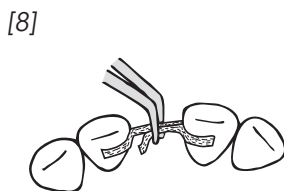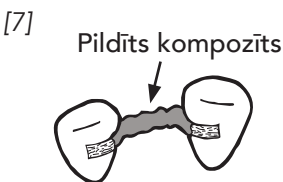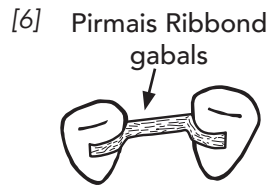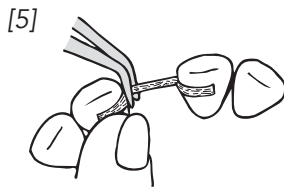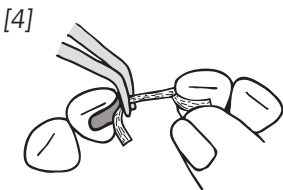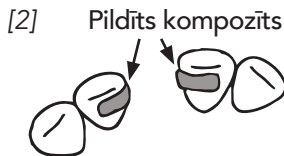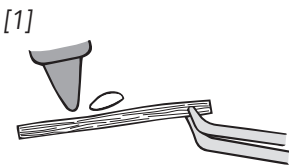

Saturs:

Lentes sākuma komplekti satur:

Ribbond® salīmējama pastiprināšanas lente un šķēres.
Lentes šķēres ir paredzētas tikai lentes šķiedras griešanai.
Šķēres nav paredzētas citiem mērķiem.

Lentes uzpildes komplekti satur:

Ribbond® pārlīmējama stiegrojuma lente.

Tikai profesionālai lietošanai

Par visiem nopietniem incidentiem ziņojiet Ribbond, Inc.
un savai kompetentajai iestādei.

www.ribbonbond.com



Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond, Inc.
2200 South St.
Racine WI 53404 USA
800-624-4554
ribbonbond@ribbonbond.com
www.ribbonbond.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
24976 Handewitt
Germany