



Ribbond®

bondable reinforcement ribbon

Armeringsbånd som kan limes



Bruksanvisning for Ribbond® bindings og forsterkningsnett

Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM,
Original Ribbond

NO

Beskrivelse:

Ribbond-bondbart forsterkningsfiber er laget av ultra-høy molekylvekt polyetylenfibre og er kald-gass plasmabehandlet for å forbedre adhesjonen med resiner.

Formål:

Ribbond forsterker dentale resiner.

Erklæring om tiltenkt bruk:

Populære bruksområder for Ribbond inkluderer forsterkning av kompositt splinter og broer. I EU er Ribbond godkjent for bruk på eller i emalje.

Forholdsregel:

Ikke ta på Ribbond forsterkningsnettet (hverken med hender eller med latekshansker) før resinet legges. Bruk pinsett, tang, eller bomullshansker. Når resinet er lagt, skal Ribbond nettet behandles på samme måte som resinet.

Oppbevaring:

Lukk Ribbond pakken med en binders slik at bindingsegenskapene ikke forringes.

Binding av Ribbond til kompositt:

Fukt Ribbond med en ufylt bondingresin som ikke inneholder dentinprimere eller syreetser.

Binding av Ribbond nettet til akryl:

Fukt Ribbond nettet med en lett blanding av væske og pulver. Innstøp Ribbond forsterkningsnettet under et lag av uherdet akryl.

Polering av Ribbond:

Fiberforsterkninger kan ikke poleres. Dekk Ribbond nettet med et mettett komposittmateriale eller akryl.

Kast:

Ingen spesielle hensyn.

Skinner:

1. **Mål mengden Ribbond som trengs.** Bruk tanntråd eller folie for å lage et mønster.
2. **Klipp Ribbond.** Håndter med metalltang.
3. **Forbered tennene for bonding,** påfør bondingresin og herd.
4. **Fukt Ribbond med resin.** Bruk ufylt bondingresin uten dentinprimere eller syreetser. [1]
5. **Påfør kompositt på tennene.** Påfør et tynt lag kompositt med middels viskositet på kontaktområdene. [2]
6. **Press fuktet Ribbond inn i kompositten.** [3-5]
7. **Fjern overflødig kompositt og herd.** [6]
8. **Dekk Ribbond med flytende kompositt og herd.** Fiberforsterkninger kan ikke poleres. Glatt ut kompositten før herding.


[1]




[2]




[3]

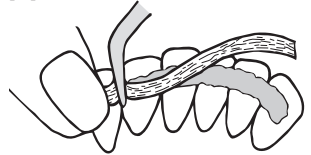


[4]

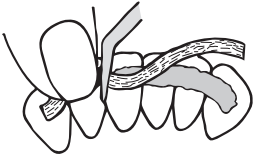

[5]








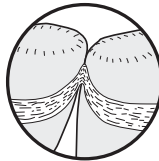


[6]

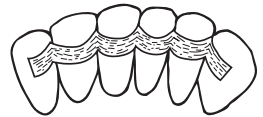

Broer:

1. **Mål mengden Ribbond som trengs.** Bruk tanntråd eller folie for å lage et mønster.
2. **Klipp Ribbond.** Håndter med metalltang.
3. **Forbered tennene for bonding,** påfør bondingresin og herd.
4. **Fukt Ribbond med resin.** Bruk ufylt bondingresin uten dentinprimere eller syreetser. [1]
5. **Påfør kompositt på tennene.** Påfør et tynt lag med en middels viskøs fylt kompositt på kontaktområdene. [2]
6. **Press fuktet Ribbond inn i kompositten.** [3-6]
7. **Fjern overflødig kompositt og lysherd.**
8. **Legg til et andre lag med Ribbond i pontic-området.**
 - a. **Påfør et tynt lag med en middels viskøs fylt kompositt** på den linguale/palatinale siden av den herdede Ribbond og på de interproksimale vinklene av støttepilarene. [7]
 - b. **Fukt Ribbond med resin** og plasser den i den ikke herdede kompositten. [8-9]
 - c. **Fjern overflødig kompositt og lysherd.**
9. **Bygg opp pontic.** Bygg med kompositt eller bruk pasientens naturlige tann.
10. **Dekk Ribbond med flytende kompositt og herd.** Fiberforsterkninger kan ikke poleres. Glatt ut kompositten før herding.

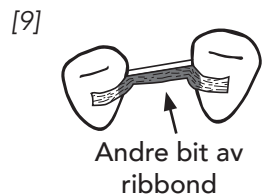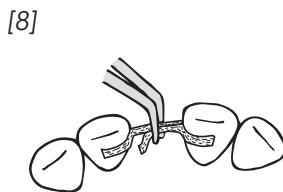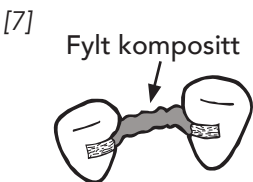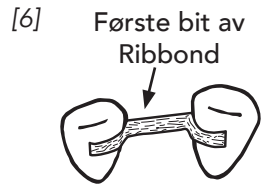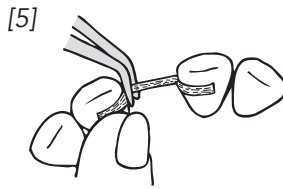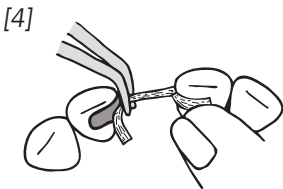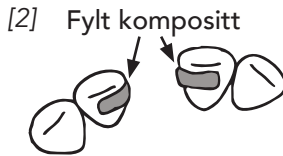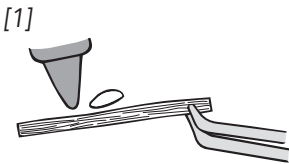

Innhold:

Ribbons grunnpakke inneholder:

Ribbon forsterkningsnett og saks.

Ribbon saksen er kun ment for å klippe Ribbon fiber.

Saksen er ikke ment for andre formål.

Ribbons refillpakke inneholder:

Ribbon forsterkningsnett.

Kun til profesjonelt bruk

Rapportér eventuelle alvorlige hendelser til Ribbond, Inc.
og til din kompetente myndighet.

www.ribbon.com



Armeringsbånd som kan limes

Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond, Inc.
2200 South St.
Racine WI 53404 USA
800-624-4554
ribbon@ribbon.com
www.ribbon.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
24976 Handewitt
Germany