



Ribbond®

bondable reinforcement ribbon



Instruktioner

SV

Ribbond® bondningsbar förstärkning

Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM,
Original Ribbond

Beskrivning:

Ribbond fiberförstärkning bondas som förstärkning av resiner som komposit genom att fibrerna som är av polyten som behandlats med plasma som media för att stärka adhesionen.

Användning:

Ribbond förstärker dentala resiner.

Beskrivning av användningen:

Vanligen används Ribbond som förstärkning av komposit splints och broar. Inom EU är Ribbond godkänt på eller i emalj.

Hantering:

Vidrör aldrig banden med händerna eller med latexhandskar. Bäst är pincetter. Efter att resin/komposit applicerats, kan Ribbond hanteras som kompositer.

Förvaringskrav:

Efter det att Ribbond-förpackningen har öppnats skall den förseglas med ett gem för att bibehålla bondingegenskaperna.

Bonding av Ribbond till komposit:

Fukta Ribbond med en ofyllt bondingresin som inte innehåller dentinprimer eller syra ets.

Bondning av Ribbond till akryl:

Blöt Ribbond med en rinnig blandning av akrylpulver och vätska. Bädda in bandet i akrylat.

Polering av Ribbond:

Ribbond får inte poleras, det ska vara täckt med komposit eller akryl.

Avfallshantering:

Rester kan slängas med den vanliga sophantering.


Splints:

1. **Mät längden av Ribbond som ska användas.** Använd floss som mått.
2. **Klipp av Ribbond** med den speciella sax som Ribbond erbjuder.
3. **Förbered aktuella tänder för bonding**, applicera bonding och härda.
4. **Fukta Ribbond** med ofylld resin utan dentin primers och etsmedel. [1]
5. **Applicera komposit till tänderna.** Det ska vara ett tunt lager av komposit med mediumviskositet i nivå med kontaktpunkterna. [2]
6. **Pressa den fuktade Ribbond in i kompositet.** [3-5]
7. **Avlägsna överskott och härda.** [6]
8. **Täck Ribbond med flytande komposit och härda.** Ribbond kan inte poleras därför ska ytan jämnas till före härdning.


[1]




[2]

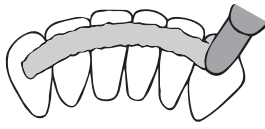


[3]

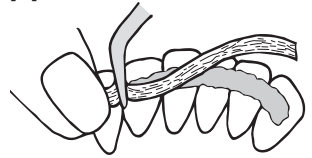


[4]

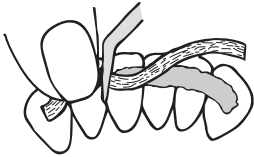

[5]









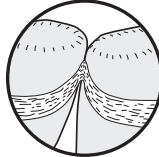


[6]

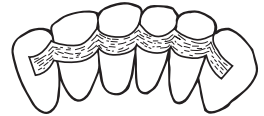

Broar:

1. **Mät längden av Ribbond som ska användas.** Använd floss som mått.
2. **Klipp av Ribbond** med den speciella sax som Ribbond erbjuder.
3. **Förbered aktuella tänder för bonding,** applicera bonding och härda.
4. **Bonda Ribbond till komposit.** Fukta Ribbond med en ofylld bonding resin som inte innehåller dentin primers eller etsmedel. [1]
5. **Applicera komposit till tänderna.** Det ska vara ett tunt lager av komposit med mediumviskositet i nivå med kontaktpunkterna. [2]
6. **Pressa den fuktade Ribbond in i kompositet.** [3-6]
7. **Avlägsna överskott och härda.**
8. **Addera ett andra lager i området för pontic.**
 - a. **Applicera ett tunt lager av komposit** med medium viskositet i de linguala/palatenala av Ribbond samt de interproximala vinklarna på stödtänderna. [7]
 - b. **Fukta Ribbond** med resin och placera i kompositet. [8-9]
 - c. **Avlägsna överskott och härda.**
9. **Forma pontic** med komposit av vald färg.
10. **Täck Ribbond med flytande komposit och härda.** Ribbond kan inte poleras därför ska ytan jämnas till före härdning.

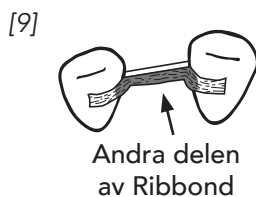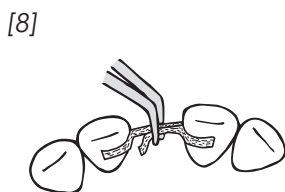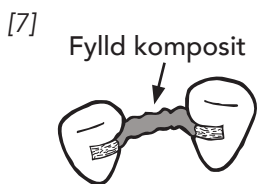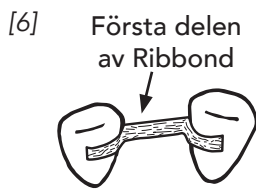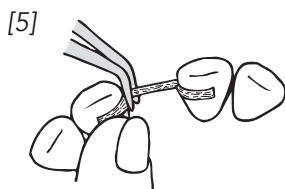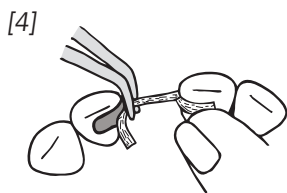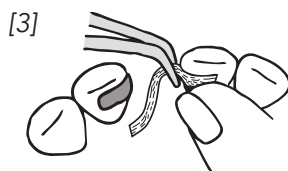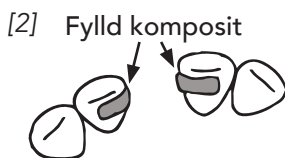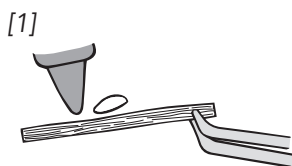

Innehåll:

Ribbons grunnpakke inneholder:

Ribbond bondningsbar förstärkningsband och sax.
Ribbond saxar får endast användas till att klippa Ribbond fiber.
Saxarna får inte användas till att klippa annat än Ribbond.

Ribbond refill innehåller:

Ribbond bondningsbara förstärkningsband.

Endast för professionellt bruk

Rapportera oroanmälning till Ribbond, Inc.,
eller till DentMan AB samt Läkemedelsverket.

www.ribbonbond.com



Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond, Inc.
2200 South St.
Racine WI 53404 USA
800-624-4554
ribbonbond@ribbonbond.com
www.ribbonbond.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
24976 Handewitt
Germany